



GB148 illustré

Couleurs standard :



Red Velvet
(Installé)



Coastal Blue
(inclus dans la
boîte)

NEW Sporty

Couleurs en option :




Crisp White



Canary Yellow




Stone Grey

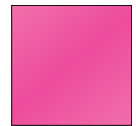

Orchid Pink



Army Green
(Mat)

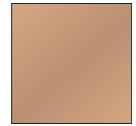

Desert Tan

Nouveau feu de position LED sportif sur le 4-WEX

Buzzaround 3 - Roues GB118 4 - Roues GB148



Le scooter BuzzAround Extreme allie la portabilité et la facilité de démontage d'un modèle léger aux performances et au confort d'un scooter de grande taille. Il est équipé de caractéristiques de confort standard telles qu'un siège rembourré à dossier haut, un guidon réglable d'une seule main et un port de recharge USB pratique placé juste sous le tableau de bord. Le modèle à quatre roues est équipé d'un feu de position LED en V à l'avant, qui assure une visibilité optimale et une sécurité accrue, de jour comme de nuit. Le modèle 4 roues est doté d'un nouveau feu de circulation à LED à l'avant pour une sécurité et une visibilité maximales. Doté de deux batteries U1 de série, les plus puissantes de leur catégorie, il offre une autonomie exceptionnelle pouvant aller jusqu'à 29 km. Avec une capacité de charge de 159 kg, une suspension à ressorts et un rayon de braquage de 102 cm, il garantit une conduite souple et confortable, même sur des terrains irréguliers. Allez plus loin, plus longtemps et en tout confort avec le BuzzAround Extreme !

Caractéristiques standard :

- Capacité de poids de 350 lb
- Garde au sol de 4 po
- Pleine grandeur et portable
- Contrôleur plus grand de 90 ampères
- Moteur plus puissant de 320 watts
- Pneus plus grands de 9 po
- Batterie U1 pour une autonomie maximale
- Phares et feux arrière à DEL ultra-lumineux
- Ressorts de suspension confortables
- Pleine grandeur, mais portable et facile à démonter



Démontage sans fil en 4 étapes faciles !

Modèle :	GB118	GB148
Description	EX	EX
Dispositif médical de classe I	Oui	Oui
Capacité de poids	350 lbs.	350 lbs.
Roues motrices	Arrière	Arrière
Vitesse maximale	5 mph	5 mph
Portée opérationnelle jusqu'à ¹	18 miles	18 miles
Dégagement sous le pont 4" 4"		
Rayon de braquage	40.5"	54"
Type de batteries	2-U1	2-U1
Couleurs	Rouge, Bleu	Rouge, Bleu
Mode roue libre	Oui	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui	Oui
Freins électromécaniques	Oui	Oui
Chargeur	Non embarqué	Non embarqué
Contrôleur	90 Amp Dynamic Série R	90 Amp Dynamic Série R

Dimensions		
Longueur	45"	44"
Largeur	22"	22"
Hauteur (du sol au sommet du dossier du siège du dossier du siège)	35"-37"	35"-37"
Du sol au sommet du siège	22.75"-24.75"	22.75"-24.75"
Du sol au sommet du pont	6.75"	6.75"
Du pont au dessus du siège	16"-18"	16"-18"
Nombre de positions en hauteur du siège 3		3
Taille des incréments	1"	1"
De l'essieu avant à l'essieu arrière	34.7"	33.8"
Poids de l'unité : (assemblé)	154 lbs.	161 lbs.

Moitié avant	46 lbs.	53 lbs.
Moitié arrière	36 lbs.	36 lbs.
Siège avec accoudoirs	23 lbs.	23 lbs.
Batteries	24 lbs. par paquet	24 lbs. par paquet

Pneus :		
Pneus standard	Solides, profil bas	Solides, profil bas
Pneus en option	N/A	N/A
Avant	9"	9"
Arrière	9"	9"
Roues arrière anti-basculement	2"	2"

Siège standard :		
Dossier haut		Dossier haut
Hauteur du dossier - sans appuie-tête	18" 18"	
Largeur x Profondeur	18" x 16"	18" x 16"
Couleur	Vinyle noir	Vinyle noir

Sièges en option :		
Style stade		Style stade
Hauteur du dossier - sans appui-tête	16"	16"
Largeur x Profondeur	20" x 18"	20" x 18"
Couleur	Vinyle noir	Vinyle noir

Garantie :		
Cadre	Garantie à vie	Garantie à vie
Groupe motopropulseur	Garantie de 2 ans	Garantie de 2 ans
Électronique ²	Garantie de 2 ans	Garantie de 2 ans
Batteries	Garantie de 1 an	Garantie de 1 an

¹ Autonomie de la batterie à 200 lb. Elle varie en fonction du poids du conducteur, de la surface de conduite, du terrain et du type de batterie.
² La garantie de l'électronique exclut les batteries.



Étape 1 : Enlevez le siège !



Étape 2 : Retirez la batterie !



Étape 3 : Rabattre le timon et le verrouiller en place !



Étape 4 : Tirez vers l'avant le levier de déverrouillage de la transmission pour séparer les sections avant et arrière du cadre !



Se démonte en 6 pièces !

modèle à 4 roues illustré



Un port de recharge de batterie est commodément situé sur le guidon, sous le panneau de commande.